

WICHTIG!
VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN FÜR SPÄTERES LESEN
AUFBEWAHREN.

Lieferumfang

- 1x digitales Fieberthermometer (inkl. 1,5V LR41)
- 1x Badethermometer
- 1x Nasensauger
- 1x Finger-Zahnbürste
- 1x Haarbürste
- 1x Kamm
- 1x Nagelschere
- 1x Nagelknipser mit integrierter Nagelfeile
- 1x Etui
- Gebrauchsanweisung

Material

100% Polyester, Kunststoff, Edelstahl, Silikon, TPE, Ziegenhaar

ACHTUNG!

- Diese Artikel sind kein Spielzeug, außer Reichweite von Kindern aufbewahren!
- Lasse Kinder nicht mit dem Produkt und den einzelnen Produkten unbeaufsichtigt. Benutzung nur durch Erwachsene.
- Bitte benutze die Artikel nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe die Artikel vor jeder Benutzung auf sichtbare Beschädigungen. Bei Anzeichen von Mängeln nicht verwenden, sondern entsorgen!

Badethermometer

Sicherheitshinweise

- Kontrolliere die Kapillare regelmäßig, vor allem nach Erschütterungen!
- Beschädigungen können zu einer falschen Temperaturanzeige führen!
- Kein geeichtes Thermometer!
- Optimale Badetemperatur (36-37 °C)
- Messbereich 0 °C bis max. 50 °C
- Temperaturtoleranz ±2°C!

Anwendung

Wasser gut vermischen. Thermometer ca. 2 Minuten in das Badewasser legen. Temperatur ablesen. **Wasser-temperatur zusätzlich mit dem Ellenbogen prüfen!**

Reinigung

Nach jeder Benutzung mit warmem Wasser abspülen. Gut trocknen lassen.

Nasensauger

Sicherheitshinweise

- Verwende den Nasensauger nicht im Mund oder in den Ohren!
- Nicht zu tief in die Nase einführen, sondern nur an das Nasenloch ansetzen. Es besteht Verletzungs-gefahr!

Anwendung

Drücke den Pumpball in der Mitte zusammen und setze die Saugspitze vorsichtig an das verstopfte Nasenloch an. Halte das andere Nasenloch mit dem Finger etwas zu. Verringere langsam den Druck auf den Pumpball und sauge dadurch das Sekret ab.

Reinigung

Reinige den Nasensauger vor dem ersten Gebrauch mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser. Verwende keine Chemikalien, die das Material schädigen können. Vor und nach jedem Gebrauch gründlich unter fließend warmem Wasser reinigen und im Vaporisator oder durch 5 min. abkochen desinfizieren. Nicht in der Spülmaschine reinigen! Auseinandergebaut gut trocknen lassen. Zur hygienischen Aufbewahrung kann die Saugspitze umgekehrt in den Pumpball gesteckt werden.

Finger-Zahnbürste

Anwendung

Setze die Finger-Zahnbürste auf deinen Finger und massiere sanft das Zahnfleisch oder reinige die Zähne.

Reinigung

Vor (Erst-) Gebrauch Desinfektion im Vaporisator oder durch 5 min. Abkochen. Nicht in der Spülmaschine reinigen. Vor und nach jedem Gebrauch unter fließend, warmem Wasser gründlich reinigen. Verwende keine Chemikalien, die das Material schädigen können.

Haarbürste und Kamm

Anwendung

Kämme / Bürste sanft vom Haaransatz bis zu den Spitzen.

Reinigung

Reinige die Bürste und den Kamm mit warmem Wasser und mit etwas mildem Babyshampoo. Gut abspülen und trocknen lassen.

Nagelschere und Nagelknipser mit integrierter Nagelfeile

Sicherheitshinweise

- Schneide oder knipse die Nägel nicht zu dicht an der Fingerkuppe ab. Verletzungsrisiko!
- Achtung! Kleinteile am Nagelknipser!

Anwendung

Schneide oder knipse die Nägel am besten nach einem Bad, wenn die Nägel weich sind. Die Nagelfeile befindet sich am Nagelknipser. Ziehe dafür den gummierten Drückerrücken ab.

Reinigung

Wische die Nagelschere und den Nagelknipser mit einem feuchten Tuch ab. Gut trocknen lassen.

Etui

Reinigung

Wische das Etui mit einem feuchten Tuch ab. Gut trocknen lassen. Nicht maschinenwaschbar. Nicht bleichen, nicht in den Trockner, nicht bügeln und keine chemische Reinigung.

Digitales Fieberthermometer

Zeichenerklärung

In der Gebrauchsanweisung, auf der Verpackung und auf dem Typschild des Geräts und des Zubehörs werden folgende Symbole verwendet:

	Vorsicht
	Zulässige Lagerungs- und Transporttemperatur und- Luftfeuchtigkeit
	Zulässige Betriebstemperatur und - Luftfeuchtigkeit
	Hersteller
	Gebrauchsanweisung beachten
	Anwendungsteil Typ BF
	Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Chargenbezeichnung
	Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörper mit einem Durchmesser>12,5 mm. Geschützt vor zeitweiligem Untertauchen.
	Die CE-Kennzeichnung bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/ EEC für Medizinprodukte.

Sicherheitshinweise

- Das Thermometer ist ausschließlich für die Messung der menschlichen Körpertemperatur bestimmt.
- Das Thermometer ist nur für die in der Gebrauchsanweisung angegebenen Messorte am menschlichen Körper konzipiert.
- Überprüfe vor jeder Benutzung das Gerät auf offensichtliche Beschädigungen. Solltest Du Schäden feststellen, darf dieses Gerät nicht verwendet werden.
- Das Gerät darf, mit Ausnahme des Deckels am Batteriefach, nicht geöffnet werden. Am Gerät dürfen keine Änderungen vorgenommen werden. Sollte ein Gerät fehlerhaft arbeiten, bitten wir Dich, Dich an Deinen Händler zu wenden.
- Kinder unter 12 Jahren sollten ihre Körpertemperatur nicht unbeaufsichtigt messen.
- Dieses Thermometer enthält Kleinteile, die verschluckt werden können oder für Kinder ein Erstickungsrisiko darstellen. Bewahren Sie das Thermometer immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Gerät darf, mit Ausnahme des Deckels am Batteriefach, nicht geöffnet werden. Am Gerät dürfen keine Änderungen vorgenommen werden. Sollte ein Gerät fehlerhaft arbeiten, bitten wir Dich, Dich an Deinen Händler zu wenden.
- Bewahre die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es besteht die Gefahr des Verschluckens.
- Das Thermometer beinhaltet empfindliche elektronische Bauteile. Schütze es deshalb vor Stößen, Biegungen, hohen Temperaturen oder direkter Sonnenbestrahlung.
- Die Mindestmessdauer bis zum Signalton ist ausnahmslos einzuhalten.
- Der Betrieb im Bereich starker elektromagnetischer Felder, wie z.B. neben einem Mobiltelefon, kann zu Fehlfunktionen führen.
- Bei auffälligen Temperaturergebnissen wende dich bitte unverzüglich an Deinen Hausarzt.
- Bitte beachte dabei, dass tragbare und mobile HF-Kommunikationseinrichtungen dieses Gerät beeinflussen können. Genauere Angaben kannst Du unter der angegebenen Kundenservice-Adresse anfordern.
- Wenn die Umgebungstemperatur über 35°C oder 95 °F liegt, tauche vor dem Messen die Thermometerspitze für ca. 5 bis 10 Sekunden in kaltes Wasser.

Inbetriebnahme

Zum Einschalten drücke die -Taste. Ein kurzer Signalton ertönt. Zunächst führt das Thermometer einen Selbsttest durch. Dabei zeigt das Display alle Segmente in der Anzeige an. Anschließend wird der letzte Messwert für ca. 2 Sek. angezeigt. Das Thermometer ist Messbereit wenn das Display „Lo“ anzeigt und das „°C“ bzw. „°F“- Zeichen“ blinkt. Halte bei ausgeschaltetem Gerät die Ein/Aus-Taste ca. 2 Sekunden lang gedrückt, um die aktuelle Einstellung zwischen °C und F zu ändern.

Während der Messung wird die aktuelle Temperatur laufend angezeigt und das „°C“ blinkt während der gesamten Messzeit. Nach ca. 20 Sekunden ist die Messung abgeschlossen. Die Messung endet bei Erreichung einer Temperaturstabilität. Ein akustisches Signal ertönt (10 langsame Pieptöne), das „Lo“-Zeichen blinkt nicht mehr und der gemessene Temperaturwert wird angezeigt.

Zur Verlängerung der Batterielebensdauer schalte bitte nach der Messung das Thermometer durch kurzes Drücken der -Taste aus. Ansonsten schaltet sich das Thermometer nach ca. 10 Min. automatisch ab.

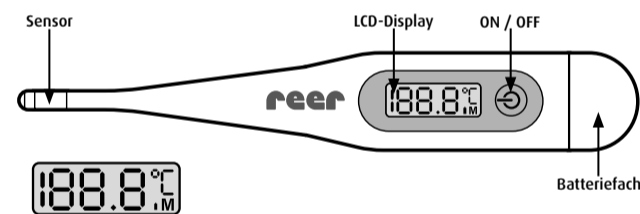


Abb. 1

Fieberalarm

Wird eine Körpertemperatur über 37,8 °C (100 °F) gemessen, ertönt ein Fieberalarm (10 x 3 schnelle Pieptöne). Sobald Temperaturen außerhalb des Messbereichs gemessen werden, erscheint im Display ein „Lo“ bei Temperaturen unter 32°C (90 °F) und ein „Hi“ über 42,9°C (109,9°F)

Anzeige des letzten Messwertes

Der zuletzt gespeicherte Messwert wird immer beim Einschalten des Thermometers für ca. 2 Sek. angezeigt.

Messwertstreuung

Abhängig von den Messorten schwanken die gemessenen Temperaturen. Das ist normal und durch die unterschiedliche Temperaturverteilung im menschlichen Körper bedingt. So werden beispielsweise bei einer rektal gemessenen Temperatur von 36,6°C einen oral gemessenen Wert von 36,1°C und axillar gemessen von 35,6°C. Bei mehreren Messungen solltest Du ca. 4 Minuten pausieren.

Messorte

Im After (rektal)

Dies ist die sicherste Methode. Sie eignet sich besonders für Säuglinge und Kleinkinder. Die Thermometerspitze wird vorsichtig 2-3 cm weit in den After eingeführt. Messzeit: ca. 20 Sekunden

In der Mundhöhle (Oral)

In der Mundhöhle sind kleine Temperaturschwankungen von Messung zu Messung normal. Sie werden durch die unterschiedliche Temperaturverteilung in der Mundhöhle verursacht. Führe das Thermometer in eine der beiden Wärmetaschen unter der Zunge, links und rechts an der Zungenwurzel. Der Temperatur-Sensor muss einen guten Gewebekontakt haben. Schließe den Mund vor der Messung für ca. 1 Minute und atme ruhig durch die Nase. Dann führe die Messspitze des Thermometers in die Wärmetasche und schließe den Mund. So wird das Messergebnis nicht durch die Atemluft beeinflusst. Messzeit in der Mundhöhle: ca. 30 Sekunden

Unter dem Arm (axillar)

Diese Messart ergibt aus medizinischer Sicht zu ungenaue Werte. Sie ist deshalb nur Durchführung von genauen Messungen ungeeignet. Der Grund dafür ist, dass der Kontakt des Temperatur-Sensors mit der Achselhöhle wesentlich schlechter ist als bei oraler oder rektaler Messung. So erfolgt kein für eine sichere Messung erforderlicher Temperatureausgleich des Temperatur-Sensors mit dem anliegenden Gewebe.


Messmethode	Empfohlene Messdauer	Mittlere Abweichung zur rektalen Methode
im After	bis zum Signalton	-
in der Mundhöhle	bis zum Signalton	-0,4 °C bis -1,5 °C
in der Achselhöhle	min. 5 Min.	-0,7 °C bis -2,0 °C

Batteriewechsel

Sobald im Display das Symbol erscheint, ist die Batterie erschöpft und ein Batteriewechsel nötig. Ersetzen Sie die erschöpfte Batterie durch eine gleichen Typs. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

Lösen Sie die Schraube des Batteriefachs mit Hilfe eines Schraubendrehers. Entnehmen Sie die verbrauchte Batterie und setzen Sie die neue Batterie (Typ LR41, SR41 oder UCC 392) ein. Bitte achten Sie auf die Einbaulage. Das +Zeichen auf der Batterie muss nach oben zeigen. Verschrauben Sie anschließend wieder den Batteriefachdeckel auf dem Gehäuse. Batterien erhalten Sie in Uhren- oder Elektrofachgeschäften.

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet die Batterien zu entsorgen. Entsorgen Sie diese über Ihren Elektrofachhändler oder ihre örtliche Wertstoff-Sammelstelle.

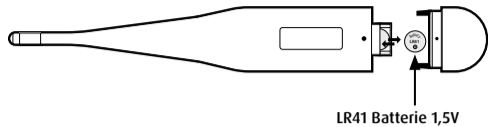

⚠ Hinweise zum Umgang mit Batterien

- Wenn Flüssigkeit aus einer Batteriezelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, die betroffene Stelle mit Wasser auswaschen und ärztliche Hilfe aufsuchen.
- Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, Schutzhandschuhe anziehen und das Batteriefach mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme.

⚠ Verschluckungsgefahr!

Kleinkinder könnten Batterien verschlucken und daran ersticken. Daher Batterien für Kleinkinder unerreichbar aufbewahren!

Messtechnische Kontrolle

Eine Überprüfung der Messgenauigkeit des Fieberthermometers ist im Regelfall nicht erforderlich. Für Geräte, die in Deutschland in der medizinischen Praxis Verwendung finden, schreibt die Medizinprodukte-Betreiberverordnung vom 29. Juni 1998 (in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.08.2002, zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21.04.2021) eine messtechnische Kontrolle nach 2 Jahren vor. Eine kostenpflichtige messtechnische Kontrolle führen die Eichämter durch.

Reinigung und Desinfektion

- Desinfizieren Sie das Thermometer und die Messspitze mit Alkohol (75% Isopropylalkohol). Jede Apotheke führt Alkoholtupfer (Alkoholpads) verschiedener Anbieter, mit denen das Gerät komplett abgewischt werden kann.
- Trocken Sie das Thermometer mit einem weichen Tuch.
- NICHT AUSKOCHEN ODER IN DER GESCHIRRSPÜLMASCHINE REINIGEN. Dies beeinträchtigt die Funktionsfähigkeit des Thermometers und führt zum Erlöschen der Garantie.
- Das Gerät nicht mit Verdünnungsmittel oder chemischem Lösungsmittel waschen.
- Bewahren Sie das Thermometer trocken, staubfrei und vor Verschmutzung und direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf.

Mikrobielle Kontamination

Da eine hundertprozentige Desinfektion im häuslichen Einsatz häufig nicht gegeben ist, wird dringend empfohlen, dass jeder Patient sein eigenes Fieberthermometer nutzt.

Entsorgungshinweise

- Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie in kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.
- Nach dem Ende der Nutzungsdauer entsorgen Sie das Gerät bitte sachgerecht über eine kommunale Sammelstelle für elektrische Altgeräte.

Gesetzliche Grundlage für das Inverkehrbringen in der EU:

Der Hersteller wurde nach der Richtlinie 93/42/EEC über Medizinprodukte zertifiziert. Dieses Gerät entspricht der europäischen Norm EN60601-1-2 für die elektromagnetische Verträglichkeit und erfüllt die Anforderungen der EN 12470-3.

Technische Daten digitales Fieberthermometer

Typ:	ClassicTemp digitales Fieberthermometer
Artikelnummer:	98102 (Model: DMT-4132)
Messbereich:	32,0°C bis 42,9°C (90°F~109,9°F)
Messgenauigkeit:	±0,1°C(±0,2°F) im Wasserbad zwischen 35,5–42,0°C (95,5°F–107,6°F) ±0,2°C(±0,4°F) bei einer Temperatur zwischen 32,0 -35,5°C (89,6 °F - 95,9°F) und 42,0 °C - 42,2 °C (107,6°F-108,1°F)
Messeinheiten:	Celsius (°C)
Fieberalarm:	akustisch bei >37,8°C (100 °F)
Anzeige:	3-stellige Flüssigkristall-Anzeige (LCD-Display)
Batterie-Typ:	1 x LR41 (Im Lieferumfang enthalten)
Nettogewicht:	13 g
Umgebungstemperatur	
	+5 °C bis +40 °C, bei 15% bis 95 % rel.Luftfeuchte
	-20 °C bis +55 °C , bei 15 % bis 95 % rel. Luftfeuchte

Batterie

- Typ: LR41
- Chemisches System: AlMn
- Nennspannung: 1,5V
- Kapazität: 41mAh
- Hersteller: Guangdong TIANQIU Electronics Technology Co., Ltd.
- Anschrift: Tianqiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone, Machong Town, Dongguan, Guangdong, China
- Homepage: www.tmqq.cn

EU REP Company Address

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

JOYTECH HEALTHCARE Co., Ltd.

No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou city, 311100, Zhejiang, China

Garantie

Bitte Kaufbeleg, Gebrauchsanleitung und Artikelnummer aufbewahren. Gewährleistungsansprüche oder Ansprüche aus Garantieverprechen sind ausschließlich mit dem Händler abzuwickeln. Alle technischen Daten, Informationen sowie Eigenschaften des in diesem Werk beschriebenen Produktes wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand bei Veröffentlichung. Die von reer bereitgestellten Informationen sollten korrekt und zuverlässig sein. Die Firma reer übernimmt dennoch keinerlei Haftung für mögliche Fehler in diesem Dokument und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Änderungen am Produktdesign beziehungsweise an den Spezifikationen vorzunehmen. Vervielfältigung und Weitergabe von Informationen aus diesem urheberrechtlich geschützten Werk in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise, grafisch, elektronisch oder mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen auf Band oder Speichern in einem Datenabfragesystem, auch auszugsweise, bedürfen einer vorherigen schriftlichen Genehmigung der Firma reer.

Vertrieb & Kundendienst:

reer GmbH • Mühlstr. 41 • 71229 Leonberg • Germany
www.reer.de • info@reer.de

IMPORTANT!
THE FOLLOWING INSTRUCTIONS MUST BE READ CAREFULLY AND RETAINED FOR FUTURE REFERENCE KEEP INSTRUCTIONS SAFE!

Deliverables

- 1x digital clinical thermometer
- 1x 1.5 V LR41
- 1x bath thermometer
- 1x nasal aspirator
- 1x finger toothbrush
- 1x hairbrush
- 1x comb
- 1x nail scissors
- 1x nail clippers with integrated nail file
- 1x case
- 1x instructions for use

Material

100% polyester, plastic, stainless steel, silicone, TPE, natural bristles by goat hair

WARNING!

- These items are not a toy; keep out of the reach of children!
- Do not leave children unattended with the product and the individual products. Only for use by adults.
- Please only use the items for their intended purpose.
- Check the items for visible damage before each use. If there are any signs of damage, do not use. Dispose of product!

Bath thermometer

Safety notes

- Check the thermometer capillary regularly, especially after shaking!
- Damage may lead to an incorrect temperature being displayed!
- This is not a calibrated thermometer.
- Optimum bathing temperature (36-37°C)
- Measuring range 0 °C to max. 50 °C
- Temperature tolerance ±2 °C!

Use

Mix water well. Place the thermometer in the bath water for approx. 2 minutes. Read the temperature. **Always check the water temperature with your elbow too!**

Cleaning

Rinse with warm water after each use. Allow to dry well.

Safety nasal aspirator

Safety notes

- Do not use the nasal aspirator in the mouth or ears!
- Do not insert too deeply into the nose; only place it by the nostril. There is a risk of injury otherwise!

Use

Squeeze the pump ball in the centre and carefully place the suction tip in the blocked nostril. Hold the other nostril slightly closed with your finger. Slowly reduce the pressure on the pump ball and suck out the secretion.

Cleaning

Clean the nasal aspirator with a mild detergent and warm water before using it for the first time. Clean the nasal aspirator with a mild detergent and warm water before and after each use. Do not use chemicals that might damage the material. Clean thoroughly under warm running water before and after each use and disinfect in a steriliser or by placing it in boiling water for 5 minutes. Do not clean in the dishwasher! Allow to dry thoroughly when disassembled. For hygienic storage, the suction tip can be placed upside down in the pump ball.

Finger toothbrush

Use

Place the finger toothbrush on your finger and gently massage the gums or clean the teeth.

Cleaning

Before (first) use, disinfect in a steriliser or by placing in boiling water for 5 minutes. Do not clean in the dishwasher! Clean thoroughly under warm running water before and after each use. Do not use chemicals that might damage the material.

Hairbrush and comb

Use

Gently comb/brush from the roots to the ends.

Cleaning

Clean the brush and comb with warm water and a little mild baby shampoo. Rinse well and leave to dry.

Nail scissors and nail clippers with an integrated nail file

Safety notes

- Do not cut or clip the nails too close to the fingertip. Risk of injury!
- Caution! Small parts on the nail clippers!

Use

It is best to cut or clip the nails after a bath when the nails are soft. The nail file is located on the nail clippers. Pull off the back of the pusher with the rubber cover.

Cleaning

Wipe the nail scissors and nail clippers with a damp cloth. Allow to dry well.

Case

Cleaning

Wipe the case with a damp cloth. Allow to dry well. Not machine washable. No bleaching, no tumble drying, no ironing and no chemical cleaning.

Digital clinical thermometer

Legend

The following symbols are used in the user manual, on the packaging and on the type plate of the device and the accessory:

	Caution
	Permitted storage and transport temperature and air humidity
	Permitted operating temperature and air humidity
	Manufacturer
	Observe the user manual
	Application part type BF
	Disposal according to the Waste Electrical and Electronic Equipment EC directive
	Batch designation
	IP27 Protection against entry of solid foreign bodies with a diameter of >12.5 mm. Protected from temporary diving.
	The CE marking certifies conformity with the basic requirements of the 93/42/EEC guidelines for medical products.

Safety instructions

- The thermometer is intended exclusively to measure human body temperature.
- The thermometer is designed to only be used at the measurement points on the human body that are specified in the user manual.
- Check the unit for visible damage before each use. If you detect any damage, do not use the unit.
- The thermometer is intended for private use.
- Children should not use the device without adult supervision. Medical products are not toys.
- Children under 12 should not measure their own body temperature without supervision.
- This thermometer contains small parts that can be swallowed or present a choking hazard for children. Always keep the thermometer out of the reach of children!
- Do not open the device, with the exception of the cover on the battery compartment. No modifications may be made to the device. If a device does not work correctly, please contact your dealer.
- Keep the battery out of the reach of children as there is a risk of swallowing.
- The thermometer contains sensitive electronic components. Protect it against impacts, bending, high temperatures or direct sunlight.
- The minimum measurement time until the sound signal must always be observed.
- Operation in the vicinity of strong electromagnetic fields, e.g. next to a mobile phone, may lead to malfunctions.
- In the event of unusual temperature readings, immediately contact your GP.
- Please note that portable and mobile HF communication equipment can affect this device. You can obtain more detailed information at the customer service address specified.
- If the ambient temperature is over 35°C or 95 °F, dip the thermometer tip in cold water for approx. 5 to 10 seconds prior to measuring the temperature.

Before first use

To switch the device on, press the -button. You will hear a short signal tone. Then, the thermometer carries out a self-test. The display indicates all the segments (**Fig. 1**) on screen. The last measured value is then displayed for approximately 2 seconds. The thermometer is ready for measurement if the display shows 'Lo' and the °C or °F symbol blinks. With the appliance switched off, press and hold the On/Off button for approx. 2 seconds to change the current setting between °C and F.

The current temperature is displayed continuously during the measurement, and the °C symbol blinks for the entire measuring duration. The measurement will be completed after about 20 seconds. The measurement ends as soon as temperature stability is achieved. An acoustic signal is produced (10 slow beeps), the °C symbol stops blinking and the measured temperature is indicated.

To prolong the battery service life, switch the thermometer off after use by pressing and releasing the -button. Otherwise, the thermometer will switch off automatically 10 minutes later.

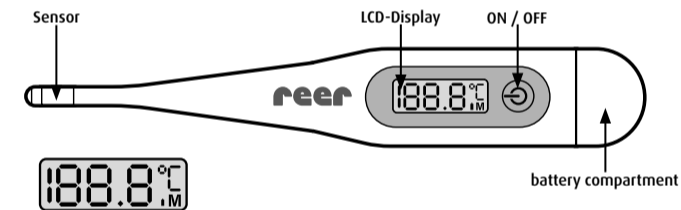


Fig. 1

Fever warning

If a body temperature of more than 37,8 °C (100 °F) is detected, a fever warning alarm signal is produced (10 x 3 quick beeps). If temperatures outside the measuring range are detected, the display indicates 'Lo' for temperatures under 32 °C (90 °F) and 'Hi' for over 42,9 °C (109,9 °F).

Last measured value display

The last measured value is always displayed during the start-up of the thermometer, for about 2 seconds indicated.

Measured value dispersion

Temperatures can vary depending on measurement points. This is normal and is caused by uneven distribution of temperature in the human body. Thus, for example, you can have a temperature of 36.6 °C if measured rectally, 36.1 °C if measured orally, and 35.6 °C if measured axillarily. With multiple measurements, take 4-minute breaks between them.

Measurement points

Anus (rectal)

This is the most reliable method. It is particularly suited for infants and small children. The thermometer tip is carefully inserted 2 cm into the anus. Measuring duration: approx. 20 seconds

In the mouth cavity (oral)

Small temperature fluctuations from measurement to measurement are normal in the mouth cavity. They are caused by uneven temperature distribution in the mouth. Insert the thermometer in one of the two heat pockets under the tongue, to the left and right of its root. The temperature sensor must have good contact with the tissue. Close the mouth before measuring for about 1 minute, breathing calmly through the nose. Then insert the measuring tip of the thermometer in the heat pocket and close the mouth. This way, the measurement result will not be affected by the air you breathe. Measuring duration in the mouth cavity: approximately 30 seconds

In the armpit (axillar)

From a medical point of view, this measurement method produces results that are too imprecise. It is thus not suitable for taking accurate measurements. The reason is that contact between the temperature sensor and the armpit is much worse than contact in the case of oral or rectal measurements. This results in there being no temperature balance between the temperature sensor and the tissue, which is necessary for a reliable measurement.


Measurement methods	Recommended measuring duration	Average deviation for the rectal method
in the anus	until the sound signal	-
in the mouth cavity	until the sound signal	-0,4 °C to -1,5 °C
in the armpit	min. 5 Min.	-0,7 °C to -2,0 °C

Changing the batteries

If the display shows an symbol, the battery is empty and requires a replacement. Replace the depleted battery with one of the same type. Take the following steps to do this:

Loosen the screw of the battery compartment using a screwdriver. Remove the empty battery and insert a new battery (LR41 / SR41 / UCC 392). Please take care to ensure the correct installation position. The '+' symbol on the battery must point upwards. Then screw the battery compartment lid back onto the housing. You can find the appropriate batteries in watch or electric appliance stores.

Used batteries should not be disposed of together with normal household waste. You are legally required to properly dispose of batteries. Dispose of these at your electric goods store or your local recyclable material collection station.

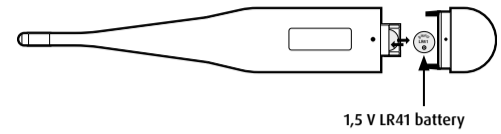

Notes on handling batteries

- If a battery cell leaks out onto your skin or eyes, wash the affected area with water and seek medical help.
- If a battery has leaked, put safety gloves on and clean the battery compartment with a dry cloth.
- Protect batteries from excess heat

Risk of swallowing!

Small children can swallow batteries and choke on them. Keep batteries away from small children!

Metrological control

As a rule, checking the thermometer's precision is not required. For devices used in Germany for medical practice, the Medical Products Operator Ordinance of 29 June 1998 (in the version announced on 21 August 2002, last amended by Article 7 of the law of 21 April 2021) requires metrological control after 2 years. Gauging offices provide paid metrological inspections.

Cleaning and disinfection

- Disinfect the thermometer and the measuring tip with alcohol (75% isopropyl alcohol). All pharmacies sell alcohol cleaning pads from various manufacturers, with which you can completely wipe the device.
- Wipe the thermometer dry with a soft cloth.
- DO NOT BOIL OR WASH IN DISHWASHER. This will negatively affect the functional capacity of the thermometer and will void the warranty.
- Do not clean the device with chemical thinners and solvents.
- Store the thermometer in a dry, dust-free, clean place away from direct sunlight.

Microbial contamination

Because complete disinfection is often not possible in household use, it is highly recommended to provide an individual thermometer to each patient.

Disposal instructions

Batteries must be disposed of appropriately. Appropriate bins for battery disposal are available for this purpose at retail shops that sell batteries, and at communal collection points.

After the end of its service life, please dispose of the device correctly through a community collection point for waste electrical products.

Legal basis for marketing the device in the EU:

The manufacturer was certified according to the guidelines of 93/42/EEC for medical products. This device complies with the EN60601-1-2 European standard on electromagnetic compatibility and meets the requirements of EN 12470-3.

Technical data

Type:	ClassicTemp digital thermometer
Item number:	98102 (Model: DMT-4132)
Measuring range:	32,0°C to 42,9°C (90°F-109,9°F)
Measuring accuracy:	±0.1 °C (±0.2 °F) in water bath, in the range 35,5-42,0 °C (95,5 °F-107,6 °F) ±0.2°C(±0.4°F) at a temperature between 32.0 -35.5°C (89.6°F - 95.9°F) and 42.0°C - 42.2°C (107.6°F-108.1°F)
Measuring units:	Centigrade
Fever warning:	acoustic warning >37,8°C (100 °F)
Display:	LCD display
Battery type:	1 x LR41 (included)
Net weight:	13 g
Ambient temperature	
Operating	+5 °C to +40 °C at 15–95% relative air humidity
Storage/Transport	-20 °C to +55 °C at 15–95% relative air humidity

Battery

- Type: LR41
- Chemical system: AlMn
- Nominal voltage: 1,5V
- Capacity: 41mAh
- Manufacturer: Guangdong TIANQIU Electronics Technology Co., Ltd.
- Address: Tianqiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone, Machong Town, Dongguan, Guangdong, China
- Home page: www.tmmq.cn

EU REP Company Address

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

JOYTECH HEALTHCARE Co., Ltd.

No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou city, 311100, Zhejiang, China

Warranty

Please retain your receipt, the instruction manual and product number. Warranty claims or claims under other promises of guarantee must be processed by the dealer. The statutory warranty period is 2 years from the date of purchase. Liability for defects does not include damage caused by inappropriate handling. The purchase receipt and a description of the defect are required for warranty claims.

The technical specification, instructions and characteristics of the product described herein have been compiled to the best of our knowledge and belief, and are correct at the time of printing. Any instructions provided by reer should be correct and reliable. Nevertheless, reer does not accept liability for potential errors in this document and reserves the right to make changes to the product design and/or specifications without prior notice.

Sales and customer service:

reer GmbH • Mühlstr. 41 • 71229 Leonberg • Germany
www.reer.de • info@reer.de

FR **BabyCare kit d’entretien**
Mode d’emploi // Réf. : 81133

IMPORTANT ! LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L’UTILISATION CONSERVER POUR UNE LECTURE ULTÉRIEURE.

Contenu de la livraison

- 1 x thermomètre médical digital
- 1 x 1,5 V LR41
- 1 x thermomètre de bain
- 1 x mouche bébé
- 1 x doigtier brosse à dents
- 1 x brosse à cheveux
- 1 x peigne
- 1 x ciseaux à ongles
- 1 x coupe-ongles avec lime à ongles intégrée
- 1 x étui
- 1 x mode d’emploi

Matériau

100 % polyester, matière plastique, acier inoxydable, silicone, TPE, soies naturelles de chèvres

ATTENTION !

- Ces articles ne sont pas des jouets, garder hors de portée des enfants !
- Ne laissez pas les enfants sans surveillance avec le produit et les différents produits. Seuls les adultes peuvent l'utiliser.
- N'utiliser les articles que pour l'usage auquel ils sont destinés.
- Avant chaque utilisation, vérifier que les articles ne présentent pas de dommages visibles. Ne pas utiliser et jeter en cas de défauts !

Thermomètre de bain

Consignes de sécurité

- Contrôle régulièrement le capillaire, surtout après des secousses !
- Toute détérioration peut entraîner une indication erronée de la température !
- Il ne s'agit pas d'un thermomètre étalonné !
- Température optimale du bain (36-37 °C)
- Plage de mesure de 0 °C à 50 °C max.
- Tolérance de température ±2°C !

Utilisation

Bien mélanger l'eau. Placer le thermomètre dans l'eau du bain pendant environ 2 minutes. Lire la température. **Vérifier aussi la température de l'eau avec le coude !**

Nettoyage

Rincer à l'eau chaude après chaque utilisation. Bien laisser sécher.

Mouche-bébé sécurisé

Consignes de sécurité

- N'utilise pas le mouche bébé dans la bouche ou dans les oreilles !
- Ne pas l'insérer trop profondément dans le nez, mais l'appliquer seulement contre la narine. Risque de blessure !

Utilisation

Comprime la pompe en appuyant sur le centre de la boule et place délicatement l'embout d'aspiration à l'entrée de la narine bouchée. Ferme un peu l'autre narine avec le doigt. Réduis lentement la pression sur la pompe et aspire ainsi les sécrétions.

Nettoyage

Avant la première utilisation, nettoie le mouche bébé avec un détergent doux et de l'eau chaude. Nettoie le mouche bébé avant et après chaque utilisation avec un détergent doux et de l'eau chaude. N'utilise pas de produits chimiques qui pourraient endommager le matériau. Nettoyer soigneusement sous l'eau courante chaude avant et après chaque utilisation et désinfecter dans un vaporisateur ou en faisant bouillir pendant 5 minutes. Ne pas nettoyer au lave-vaisselle ! Bien laisser sécher une fois démonté. Pour un rangement hygiénique, l'embout d'aspiration peut être inséré à l'envers dans la pompe.

Doigtier brosse à dents

Utilisation

Place la brosse à dents sur ton doigt et masse doucement les gencives ou nettoie les dents.

Nettoyage

Avant la (première) utilisation, désinfection dans un vaporisateur ou par ébullition pendant 5 min. Ne pas nettoyer au lave-vaisselle ! Nettoyer soigneusement à l'eau courante chaude avant et après chaque utilisation. N'utilise pas de produits chimiques qui pourraient endommager le matériau.

Brosse à cheveux et peigne

Utilisation

Peigne / brosse doucement de la racine aux pointes.

Nettoyage

Nettoie la brosse et le peigne à l'eau chaude avec un peu de shampoing doux pour bébés. Bien rincer et laisser sécher.

Ciseaux à ongles et coupe-ongles avec lime à ongles intégrée

Consignes de sécurité

- Ne coupe pas les ongles trop près du bout du doigt. Risque de blessure !
- Attention ! Petites pièces sur le coupe-ongles !

Utilisation

Il est préférable de couper les ongles après un bain, lorsque les ongles sont mous.

La lime à ongles se trouve sur le coupe-ongles. Pour l'utiliser, retire le dos caoutchouté du poussoir.

Nettoyage

Essuie les ciseaux à ongles et le coupe-ongles avec un chiffon humide. Bien laisser sécher.

Étui

Nettoyage










Essuie l'étui avec un chiffon humide. Bien laisser sécher.

Non lavable en machine. Ne pas blanchir, ne pas mettre au sèche-linge, ne pas repasser et ne pas nettoyer à sec.

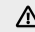Thermomètre médical digital

Explication des symboles


Les symboles suivants sont utilisés sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil et des accessoires :

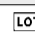	Attention
	Température de stockage et de transport et humidité de l'air autorisés
	Température de fonctionnement et humidité de l'air autorisées
	Fabricant
	Respecter la notice d'utilisation
	Élément de contact Type BF
	Élimination selon la directive CE relative aux déchets d'équipements électroniques et électriques WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Désignation du lot
IP27	Protection contre la pénétration de corps étrangers solides avec un diamètre supérieur à 12,5 mm. Protégé contre l'immersion temporaire.
	Le marquage CE atteste la conformité aux exigences fondamentales de la directive 93/42/ CEE relative aux produits médicaux.


Consignes de sécurité

- Le thermomètre est prévu exclusivement pour la mesure de la température du corps humain.
- Le thermomètre est uniquement conçu pour les points de mesure du corps humain indiqués dans la notice d'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil ne présente pas de défaut apparent. Si vous constatez un défaut, cet appareil ne doit pas être utilisé.
- Le thermomètre est prévu pour un usage privé.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le thermomètre sans l'assistance d'adultes. Les dispositifs médicaux ne sont pas des jouets.
- Les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas mesurer la température de leur corps sans surveillance.
- Ce thermomètre contient de petites pièces pouvant être ingérées ou présentant un risque d'étouffement pour les enfants. Gardez le thermomètre toujours hors de portée des enfants.
- À l'exception du logement des piles, l'appareil ne doit pas être ouvert. L'appareil ne doit pas être modifié. Si un appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez vous adresser à votre commerçant.
- Conservez les piles hors de portée des enfants. Il existe un risque d'ingestion.
- Le thermomètre contient des pièces électroniques sensibles. Protégez-le des chocs, des courbures, des températures élevées ou de la lumière directe du soleil.
- La durée de mesure minimum jusqu'au signal sonore doit être respectée sans exception.
- L'utilisation dans une zone de champ électromagnétique puissant, par ex. à proximité d'un téléphone portable, peut entraîner des dysfonctionnements.
- En cas de température extrême, veuillez consulter immédiatement votre médecin traitant.
- Prenez néanmoins en compte que les équipements de communication portables et mobiles RF peuvent influencer cetappareil. Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse du service à la clientèle fournie.
- Si la température ambiante est supérieure à 35 °C ou 95 °F, immergez la pointe du thermomètre dans de l'eau froide pendant environ 5 à 10 secondes avant de procéder à la mesure.

Mise en service

Pour mettre en marche l'appareil, appuyez sur la touche . Un bref signal sonore retentit. Tout d'abord, le thermomètre effectue un auto-test. L'écran affiche tous les segments (**Fig.1**). La dernière valeur mesurée est ensuite affichée pendant environ 2 sec. Le thermomètre est prêt pour la mesure lorsque l'affichage indique « Lo » et que le signe « °C » ou « °F » clignote. L'appareil étant éteint, appuyez sur le bouton On/Off pendant environ 2 secondes pour changer le réglage du courant entre °C et F.

Lors de la mesure, la température actuelle est affichée en permanence et le symbole « °C » clignote pendant toute la durée de la mesure. La mesure est terminée après env. 20 secondes. La mesure se termine lorsque la température est stable. Un signal sonore retentit (10 signaux sonores lents), le signe « °C » ne clignote plus et la valeur de température mesurée s'affiche.

Pour prolonger la durée de vie des piles, éteignez le thermomètre après la mesure en appuyant brièvement sur la touche . Sinon le thermomètre s'éteint automatiquement après env. 10 min.

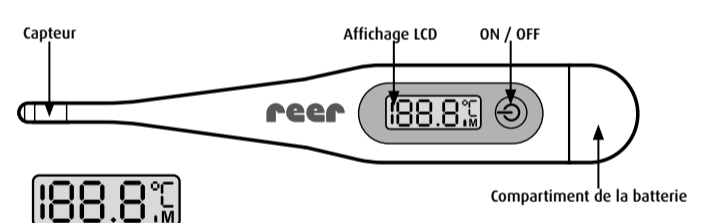


Fig. 1

Alarme de fièvre

Si une température corporelle supérieure à 37,8 °C (100 °F) est mesurée, une alarme de fièvre retentit (10 x 3 signaux sonores rapides). En cas de températures en dehors de la plage de mesure, l'affichage indique un signe « Lo » en cas de températures inférieures à 32°C (90 °F) et un signe « Hi » en cas de températures supérieures à 42,9°C (109,9 °F).

Affichage de la dernière valeur mesurée

En allumant le thermomètre, la dernière valeur mesurée enregistrée est toujours affichée pendant env. 2 sec.

Distribution des valeurs mesurées

Les températures mesurées varient en fonction des points de mesure. Ceci est normal et dû la répartition inégale de la température dans le corps humain. Par exemple, si la température d'une mesure rectale est de 36,6°C, la valeur d'une mesure orale est de 36,1°C et la valeur d'une mesure axillaire est de 35,6°C. Pour effectuer plusieurs mesures, il vous faut marquer une pause d'environ 4 minutes.

Points de mesure

Dans l'anus (rectal)

Il s'agit de la méthode la plus sécurisée. Elle convient particulièrement aux nourrissons et aux enfants en bas âge. L'extrémité du thermomètre est délicatement insérée dans l'anus sur une distance de 2 cm. Durée de mesure : env. 20 secondes

Dans la cavité buccale (oral)


Dans la cavité buccale, de petites variations de température d'une mesure à l'autre sont normales. Elles sont dues à la répartition inégale de la température dans la cavité buccale. Insérez le thermomètre dans l'une des deux poches thermiques situées sous la langue, à gauche et à droite à la racine de la langue. Le capteur de température doit avoir un bon contact tissulaire. Fermez la bouche pendant env. 1 minute avant de mesurer et respirez doucement par le nez. Insérez ensuite l'extrémité de mesure du thermomètre dans la poche thermique et fermez la bouche. Le résultat de la mesure n'est pas influencé par l'air respiratoire. Durée de mesure dans la cavité buccale : env. 30 secondes

Sous le bras (axillaire)

D'un point de vue médical, ce type de mesure entraine des valeurs imprécises. Il n'est donc pas approprié pour effectuer des mesures précises. En effet, le contact du capteur de température avec l'aisselle est nettement moins bon par rapport à celui d'une mesure orale ou rectale. Par conséquent, la compensation de température du capteur de température avec le tissu adjacent, qui est nécessaire pour une mesure sûre, n'est pas donnée.

Méthode de mesure	Durée de mesure recommandée	Écart moyen par rapport à la méthode rectale
Dans l'anus	jusqu'au signal sonore	–
dans la cavité buccale	jusqu'au signal sonore	-0,4 °C à -1,5 °C
sous le bras	au moins 5 minutes	-0,7 °C à -2,0 °C


Changement de pile

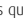
Dès que le symbole  apparaît sur l'affichage, la pile est épuisée et un changement de pile est nécessaire. Remplacez la pile épuisée par une pile dumême type. Procédez comme suit :

Desserrez la vis du compartiment des piles à l'aide d'un tournevis. Retirez la pile épuisée et insérez la nouvelle (LR41/ SR41/ UCC 392). Veuillez respecter la position de montage.


Le signe + de la pile doit être orienté vers le haut. Revissez ensuite le couvercle du compartiment des piles sur le boîtier. Vous trouverez les piles dans les magasins d'horlogerie ou d'électronique.

Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Vous avez l'obligation légale de vous débarrasser des piles. Éliminez-les chez votre revendeur de produits électroniques ou dans votre centre de recyclage local.

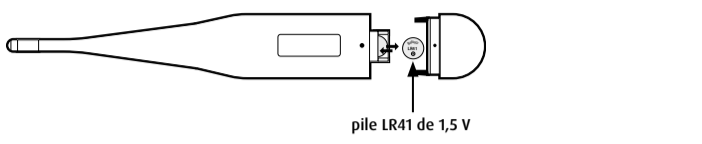

 **Indications relatives à la manipulation des batteries**

- En cas de contact du liquide d'une pile avec la peau ou les yeux, lavez la zone touchée avec de l'eau et consultez votre médecin.
- En cas de fuite d'une pile, mettez des gants de protection et nettoyez le compartiment des piles avec un chiffon sec.
- Protégez les piles de la chaleur excessive.

 **Danger d'ingestion !**

Les enfants en bas âge pourraient avaler les piles et s'étouffer. Par conséquent, mettre les piles hors de portée des enfants en bas âge !

Contrôle métrologique

En règle générale, un contrôle de la précision de mesure du thermomètre n'est pas nécessaire. L'Ordonnance allemande sur les dispositifs médicaux et leurs exploitants du 29 juin 1998 (dans la version publiée le 21/08/2002, modifiée en dernier lieu par l'article 7 de la loi du 21/04/2021) prescrit un contrôle métrologique après 2 ans pour les appareils utilisés par les professions médicales en Allemagne. Les offices de vérification effectuent un contrôle métrologique payant.


Nettoyage et désinfection

- Désinfectez le thermomètre et l'extrémité de mesure avec de l'alcool (75% d'alcool isopropylique). Dans chaque pharmacie, on trouve des tampons d'alcool (tampons d'alcool) de différents fournisseurs qui permettent d'essuyer complètement l'appareil.
- Séchez le thermomètre avec un chiffon doux.
- NE PAS FAIRE BOUILLIR NI NETTOYER AU LAVE-VAISSELLE.** Cela nuit au fonctionnement du thermomètre et annule la garantie.
- Ne pas laver l'appareil avec un diluant ou un solvant chimique.
- Conservez le thermomètre dans un endroit sec, à l'abri de la poussière, des salissures et de la lumière directe du soleil.

Contamination microbactérienne

Étant donné qu'une désinfection à 100 % dans l'usage domestique n'est pas souvent donnée, il est vivement recommandé que chaque patient utilise son propre thermomètre.

Remarques relatives à la mise au rebut



 Les piles doivent être mises au rebut de façon appropriée. À cet effet, il existe des conteneurs spéciaux pour les piles dans les magasins spécialisés, et dans les centres de recyclage communaux.

À la fin de sa durée d'utilisation, veuillez vous débarrasser de l'appareil de façon appropriée dans un centre communal de recyclage des appareils électriques usagés.

Cadre juridique pour la mise sur le marché dans l'UE :


Le fabricant a été certifié conformément à la directive 93/42/CEE relative aux produits médicaux. Cet appareil satisfait à la norme EN60601-1-2 relative à la compatibilité électromagnétique et répond aux exigences de la norme EN 12470-3.

Caractéristiques techniques

Type :	Thermomètre numérique ClassicTemp
Numéro de l'article :	98102 (Modèle: DMT-4132)
Plage de mesure :	32,0°C à 42,9°C (90°F–109,9°F)
Précision de mesure :	±0,1 °C (±0,2 °F) au bain-marie entre 35,5 et 42,0 °C (95,5 °F et 107,6 °F) <p>±0,2°C(±0,4°F) à une température comprise entre 32,0 -35,5°C (89,6°F - 95,9°F) et 42,0°C - 42,2°C (107,6°F-108,1°F)</p>
Unités de mesure :	Celsius (° C)
Alarme de fièvre :	sonores signaux >37,8°C (100 °F)
Affichage :	Affichage LCD
Types de pile :	1 x LR41 (incluses dans la livraison)
Poids net :	13 g
Température ambiante	
 Fonctionnement	+5 °C à +40 °C, pour une humidité relative de 15 % à 95 %.
 Stockage/ transport	-20 °C à +55 °C, pour une humidité relative de 15 % à 95 %.

Pile

- Type : LR41
- Système chimique : AlMn
- Tension nominale : 1,5V
- Capacité : 41mAh
- Fabricant : Guangdong TIANQIU Electronics Technology Co., Ltd.
- Adresse : Tianqiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone, Machong Town, Dongguan, Guangdong, China
- Site Internet : www.tmmq.cn

  Company Address
--

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

 **JOYTECH HEALTHCARE Co., Ltd.**

No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou city, 311100, Zhejiang, China

Garantie

Veuillez conserver la preuve d'achat, la notice d'utilisation et le numéro d'article. Les droits à la garantie ou les réclamations en vertu de la garantie sont à définir exclusivement avec le commerçant. La période de garantie légale de 2 ans commence dès le jour de l'achat. Les dégâts causés par une manipulation incorrecte sont exclus de la garantie. La preuve d'achat et la description du défaut sont des conditions préalables à l'application de la garantie.

Les caractéristiques techniques, les informations et les spécificités du produit décrites dans ces pages sont établies en toute bonne foi, et répondent au stade actuel de la technologie. Les informations fournies par reer devraient être correctes et fiables. La société reer ne peut cependant assumer aucune responsabilité pour les possibles erreurs présentes dans ce document et se réserve le droit de procéder, sans préavis, à des modifications sur la conception et les spécifications du produit.

Distribution et service à la clientèle :

reer GmbH • Mühlstr. 41 • 71229 Leonberg • Germany
www.reer.de • info@reer.de

CE
0197

IT **BabyCare kit per la cura personale**
Istruzioni per l’uso // N. art.: 81133

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER EVENTUALE RIFERIMENTO FUTURO!

Oggetto della fornitura

- 1 termometro clinico digitale
- 1 batteria 1,5 V LR41
- 1 termometro da bagno
- 1 aspiratore nasale
- 1 spazzolino da dito
- 1 spazzola per capelli
- 1 pettine
- 1 forbicina per unghie
- 1 tagliaunghie con lima integrata
- 1 custodia
- 1 manuale di istruzioni

Materiale

100% poliestere, plastica, acciaio inossidabile, silicone, TPE, setole naturali di capra

ATTENZIONE!

- Questi articoli non sono giocattoli, tenere fuori dalla portata dei bambini!
- Non lasciare i bambini da soli con il prodotto e i singoli articoli. Utilizzo destinato ai soli adulti.
- Utilizza gli articoli esclusivamente per lo scopo previsto.
- Prima di utilizzare gli articoli, verifica sempre l’eventuale presenza di danni visibili. In presenza di difetti, non utilizzare e smaltire il prodotto!

Termometro da bagnetto

Avvertenze di sicurezza

- Controllare regolarmente il capillare, soprattutto dopo le vibrazioni!
- I danni possono causare un’indicazione errata della temperatura!
- Nessun termometro calibrato!
- Temperatura ottimale dell’acqua per il bagno (36-37 °C)
- Range di misurazione da 0°C a max. 50°C
- Temperatura con una tolleranza di ±2°C!

Utilizzo

Mescolare bene con l’acqua. Mettere il termometro nell’acqua del bagnetto per circa 2 minuti. Leggere la temperatura. **Controllare anche la temperatura dell’acqua con il gomito!**

Pulizia

Dopo ogni uso risciacquare con acqua calda. Far asciugare bene.

Aspiratore nasale di sicurezza

Avvertenze di sicurezza

- Non utilizzare l’aspiratore nasale in bocca o nelle orecchie!
- Non inserirlo troppo in profondità nel naso, limitarsi ad appoggiarlo nella narice. C’è il rischio di lesioni!

Utilizzo

Premi la pompetta al centro e posiziona con attenzione la punta di aspirazione sulla narice ostruita. Tieni l’altra narice leggermente chiusa con un dito. Riduci lentamente la pressione sulla pompetta, aspirando la secrezione.

Pulizia

Prima di utilizzarlo per la prima volta, pulisci l’aspiratore nasale con un detergente delicato e acqua calda. Prima e dopo ogni utilizzo, pulisci l’aspiratore nasale con un detergente delicato e acqua calda. Non utilizzare prodotti chimici che possano danneggiare il materiale. Prima e dopo ogni utilizzo, pulire accuratamente con acqua corrente calda e disinfettare nel vaporizzatore o facendo bollire per 5 minuti. Non lavare in lavastoviglie! Lasciare che i singoli pezzi si asciughino bene. Per una conservazione igienica, la punta di aspirazione può essere infilata capovolta nella pompetta.

Spazzolino da dito

Utilizzo

Posiziona lo spazzolino sul tuo dito e massaggia delicatamente le gengive o lava i denti.

Pulizia

Prima del (primo) utilizzo, disinfettare in un vaporizzatore o facendo bollire per 5 minuti. Non lavare in lavastoviglie! Prima e dopo ogni utilizzo, pulire accuratamente con acqua corrente calda. Non utilizzare prodotti chimici che possano danneggiare il materiale.

Spazzola per capelli e pettine

Utilizzo

Pettina/spazzola delicatamente dalle radici alle punte.

Pulizia

Pulisci la spazzola e il pettine con acqua calda e un po’ di shampoo delicato per bambini. Sciacquare bene e lasciare asciugare.

Forbicina per unghie e tagliaunghie con lima integrata

Avvertenze di sicurezza

- Non tagliare le unghie troppo vicino alla punta delle dita. Rischio di lesioni!
- Attenzione! Piccole parti sul tagliaunghie!

Utilizzo

È preferibile tagliare le unghie dopo il bagno, quando sono morbide.

La limetta per unghie si trova sul tagliaunghie. Per utilizzarla, rimuovi la parte posteriore in gomma.

Pulizia

Pulisci la forbicina e il tagliaunghie con un panno umido. Far asciugare bene.

Custodia

Pulizia


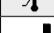

Pulisci la custodia con un panno umido. Far asciugare bene.

Non lavabile in lavatrice. Non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, non stirare e non usare detergenti chimici.

Termometro clinico digitale

Legenda


Nelle istruzioni per l’uso, sulla confezione e sulla targhetta identificativa del dispositivo e degli accessori, sono usati i simboli seguenti:

	Attenzione
	Temperatura di stoccaggio e di trasporto e umidità dell’aria consentite
	Temperatura di esercizio e umidità dell’aria consentite
	Prodotto da
	Osservare le istruzioni per l’uso
	Componente da applicare tipo BF
	Smaltimento in osservanza della direttiva CE sui dispositivi elettrici ed elettronici usati WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Designazione partita
IP27	Protezione contro la penetrazione di corpi estranei solidi con diametro > 12,5 mm. Protetto da un’immersione temporanea.
 0197	Il marchio CE conferma la conformità ai requisiti fondamentali della direttiva 93/42/CEE per i prodotti medicali.

Avvertenze di sicurezza

- Il termometro è destinato esclusivamente alla misurazione della temperatura corporea delle persone.
- Il termometro è concepito esclusivamente per essere utilizzato sui punti di misurazione del corpo indicati nelle istruzioni per l’uso.
- Prima di ogni utilizzo, verificare l’eventuale presenza di danni visibili all’apparecchio. Qualora si dovesse accertare la presenza di danni, non utilizzare l’apparecchio.
- Il termometro è destinato all’utilizzo privato. I bambini non dovrebbero utilizzare l’apparecchio senza l’aiuto di un adulto. I dispositivi medici non sono giocattoli.
- I bambini di età inferiore ai 12 anni non dovrebbero misurare la propria temperatura corporea senza la sorveglianza di un adulto.
- Questo termometro contiene piccole parti che potrebbero essere inghiottite o che costituiscono un rischio di soffocamento per i bambini. Tenere il termometro sempre fuori dalla portata dei bambini.
- L’apparecchio non può essere aperto, ad eccezione del coperchio dello scomparto batterie. Non è consentito apportare modifiche all’apparecchio. Nel caso in cui un apparecchio funzioni in modo difettoso, vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Pericolo di ingestione.
- Il termometro contiene componenti elettronici delicati. Per questo, proteggerlo da urti, flessioni, temperature elevate e dai raggi diretti del sole.
- Osservare la durata di misurazione minima fino all’emissione del segnale acustico.
- L’utilizzo in presenza di forti campi elettromagnetici, ad es. vicino a un telefono cellulare, può comportare errori di misurazione.
- In presenza di risultati di misurazione anomali, rivolgersi immediatamente al medico.
- Tenere presente che dispositivi di comunicazione in HF portatili e mobili possono influenzare questo apparecchio. Informazioni più dettagliate possono essere richieste all’indirizzo di assistenza indicato.
- Se la temperatura ambiente è superiore a 35°C o 95 °F, immergere la punta del termometro in acqua fredda per circa 5-10 secondi prima della misurazione.

Funzionamento

Per accendere il dispositivo, premere il tasto . Viene emesso un breve segnale acustico. Il termometro esegue un autotest. Il display visualizza tutti i segmenti (**fig.1**). L’ultimo valore misurato viene visualizzato per circa 2 secondi. Il termometro è pronto per l’utilizzo quando il display visualizza “Lo” e lampeggia il “simbolo °C o °F”. Con l’unità spenta, tenere premuto il pulsante On/Off per circa 2 secondi per cambiare l’impostazione corrente tra °C e F.

Durante la misurazione, viene visualizzata costantemente la temperatura attuale e il simbolo “°C” lampeggia durante tutta la misurazione. La misurazione è conclusa dopo circa 20 secondi. La misurazione termina quando viene raggiunta una temperatura stabile. Viene emesso un segnale acustico (10 bip lenti), il simbolo “°C” smette di lampeggiare e viene visualizzata la temperatura misurata.

Per aumentare la durata della batteria, dopo la misurazione spegnere il termometro premendo brevemente il tasto . In caso contrario il termometro si spegne automaticamente dopo circa 10 minuti.

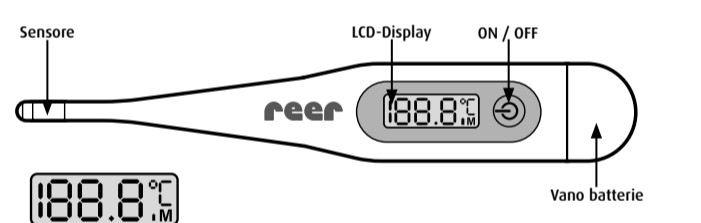


Fig. 1

Allarme febbre

Se il termometro misura una temperatura corporea superiore a 37,8 °C (100 °F), viene emesso un allarme febbre (10 volte 4 bip rapidi). Se vengono misurate temperature al di fuori del campo di misurazione, il display visualizza “Lo” se le temperature sono inferiori ai 32°C (90 °F) e “Hi” se le temperature sono superiori ai 42,9°C (109,9 °F).

Indicazione dell’ultimo valore misurato

All’accensione del termometro, viene sempre visualizzato per circa 2 secondi l’ultimo valore misurato.

Differenze valori misurati

In funzione del punto nel quale viene misurata la temperatura. Sono normali e dipendono dalle diverse temperature delle parti del corpo. Ad esempio, una temperatura di 36,6°C misurata nel retto corrisponde a una temperatura di 36,1°C misurata in bocca e a una temperatura di 35,6°C misurata sotto l’ascella. Fra una misurazione e l’altra attendere circa 4 minuti.

Punti di misurazione

Nell’ano (rettale)

È il metodo più sicuro. È particolarmente adatto per i neonati e i lattanti. Inserire delicatamente la punta del termometro per 2 cm nell’ano. Durata misurazione: circa 20 secondi

Nella cavità orale (orale)


Misurando la temperatura orale, piccoli differenze fra una misurazione e l’altra sono normali. Queste sono dovute alle diverse temperature presenti nel cavo orale. Guidare il termometro in una delle due cavità sotto la lingua, a sinistra o a destra dell’attaccatura. Il sensore di temperatura deve essere in contatto con il tessuto. Prima della misurazione, chiudere la bocca per circa 1 minuto e respirare con tranquillità dal naso. Quindi, appoggiare la punta del termometro lateralmente sotto la lingua e chiudere la bocca. In questo modo, il risultato non è influenzato dall’aria inspirata. Durata misurazione nella cavità orale: circa 30 secondi

Sotto l’ascella (ascellare)

Dal punto di vista medico, questo tipo di misurazione produce risultati imprecisi. Quindi, non è adatto se sono necessari valori precisi. Il motivo è che il contatto del sensore di temperatura con la cavità dell’ascella è peggiore di quello creato con la misurazione orale o rettale. Il necessario contatto fra sensore di temperatura e tessuto non è sufficiente per una misurazione accurata.

Sistemi di misurazione	Durata raccomandata di misurazione	Differenza media rispetto al metodo rettale
Nell’ano	fino al segnale acustico	–
Nella cavità orale	fino al segnale acustico	-0,4 °C a -1,5 °C
Sotto l’ascella	min. 5 minuti	-0,7 °C a -2,0 °C

Sostituzione batterie

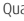
Quando sul display appare il simbolo , la batteria è quasi scarica e occorre sostituirla. Sostituire la batteria scarica con una nuova dello stesso tipo. Procedere come segue:

Allentare la vite del vano batteria con un cacciavite. Estrarre la batteria scarica e inserire una batteria nuova (LR41/ SR41/ UCC 392). Fare attenzione alla posizione di montaggio.

Il segno + sulla batteria deve essere rivolto verso l’alto.

Riavvitare il coperchio dello scomparto della batteria sullo scomparto. Le batterie possono essere acquistate da un orologiaio o in un negozio di attrezzature elettriche.

Non è consentito smaltire la batterie usate tra i rifiuti domestici comuni. La legge impone il corretto smaltimento delle batterie. Portare le batterie scariche a un negozio di attrezzature elettriche o a un centro per la raccolta differenziata.

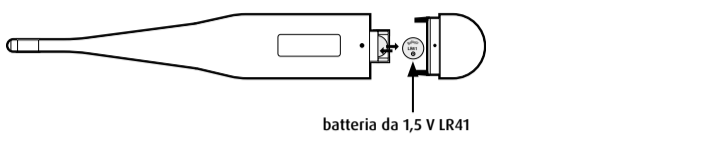

⚠ Avvertenze per l’uso delle batterie

- Se il liquido proveniente da una cella di una batteria entra in contatto con la pelle o gli occhi, lavare con abbondante acqua la parte e consultare un medico.
- Se la batteria è scarica, indossare guanti di protezione e pulire lo scomparto della batteria con un panno asciutto.
- Proteggere le batterie dal calore eccessivo.

⚠ Pericolo di ingestione!

I bambini potrebbero inghiottire le batterie rischiando il soffocamento. Per questo, tenere le batterie lontano dalla loro portata!

Controlli tecnici della misurazione

Una verifica della precisione di misurazione del termometro non è di norma necessaria. Per i dispositivi utilizzati negli studi medici, il regolamento di utilizzo dei prodotti medicali del 29 giugno 1998 (nella versione pubblicata il 21/08/2002, modificata dall’articolo 7 della legge del 21/04/2021) prescrive un controllo tecnico della misurazione ogni 2 anni. Questi controlli tecnici vengono offerti a pagamento dagli uffici metrologici autorizzati.


Pulizia e disinfezione

- Disinfettare il termometro e la punta di misurazione con alcool (alcool isopropilico al 75%). Nelle farmacie sono in vendita batuffoli imbevuti di alcool di varie marche con i quali è possibile pulire completamente il termometro.
- Pulire il termometro con un panno morbido.
- NON FARLO BOLLIRE E NON LAVARLO IN LAVASTOVIGLIE. Verrebbe compromesso il corretto funzionamento del termometro e verrebbe annullata la garanzia.
- Non lavare il dispositivo con diluente o solventi chimici.
- Conservare il termometro in luogo asciutto, non polveroso e proteggendolo dallo sporco e dai raggi diretti del sole.

Contaminazione microbatterica

Poiché spesso non è possibile eseguire una disinfezione perfetta in casa, si raccomanda vivamente che ogni paziente abbia il proprio termometro.

Modalità di smaltimento



 Le batterie vanno smaltite come prescritto. A questo scopo sono a disposizione contenitori per lo smaltimento delle batterie presso i rivenditori di batterie o presso i punti di raccolta comunali.

Alla fine della sua durata utile, smaltire il dispositivo come prescritto portandolo in un centro per la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche usate.

Condizioni giuridiche per la commercializzazione nell’UE:

Il costruttore è stato certificato ai sensi della direttiva 93/42/CEE sui prodotti medicali. Questo dispositivo è conforme alla norma europea EN60601-1-2 sulla compatibilità elettromagnetica e soddisfa i requisiti della EN 12470-3.

Dati tecnici

Tipo:	Termometro digitale per la febbre ClassicTemp
Numero articolo:	98102 (Modello: DMT-4132)
Campo di misura:	32,0°C a 42,9°C (90°F~109,9°F)
Precisione della misurazione:	±0.1°C (±0.2°F) in bagno d’acqua fra 35.5~42.0°C (95.5°F~107.6°F) ±0,2°C(±0,4°F) ad una temperatura compresa tra 32,0 -35,5°C (89,6°F - 95,9°F) e 42,0°C - 42,2°C (107,6°F-108,1°F)
Unità di misura:	Celsius (° C)
Allarme febbre:	acustici segnali >37,8°C (100 °F)
Indicatori:	Display LCD
Tipo batteria:	1 x LR41 (incluso nella dotazione)
Peso netto:	13 g
Temperatura ambiente:	
 operativa	da +5 °C a +40 °C, dal 15 % all’95 % umidità rel. dell’aria
 Stoccaggio/Trasporto	da -20 °C a +55 °C, dal 15% all’95 % umidità rel. dell’aria

Batteria

- Tipo: LR41
- Sistema chimico: AlMn
- Tensione nominale: 1,5V
- Capacità: 41mAh
- Produttore: Guangdong TIANQIU Electronics Technology Co., Ltd.
- Indirizzo: Tianqiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone, Machong Town, Dongguan, Guangdong, China
- Home page: www.tmmq.cn

	Company Address
---	------------------------

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

 **JOYTECH HEALTHCARE Co., Ltd.**

No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou city, 311100, Zhejiang, China

Garanzia

Conservare lo scontrino di cassa, le istruzioni per l’uso e il numero dell’articolo. Eventuali richieste di garanzia o diritti di garanzia devono essere gestiti esclusivamente con il rivenditore. Il periodo di garanzia di legge di 2 anni inizia alla data dell’acquisto. Sono esclusi dalla responsabilità per difetti i difetti riconducibili a un trattamento o utilizzo improprio. Presupposti per la richiesta in garanzia sono la presentazione dello scontrino di cassa e la descrizione del difetto.

Tutti i dati tecnici, le informazioni e le caratteristiche del prodotto descritti nel presente manuale sono stati elaborati in buona coscienza e corrispondono allo stato attuale al momento della pubblicazione. Le informazioni messe a disposizione da reer dovrebbero essere corrette ed affidabili. reer non si assume comunque alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel presente documento e si riserva il diritto di modificare senza preavviso il design del prodotto e le sue specifiche.

Distribuzione e servizio di assistenza:

reer GmbH • Mühlstr. 41 • 71229 Leonberg • Germany
www.reer.de • info@reer.de

ES **BabyCare juego de cuidado**
Instrucciones de uso // N° d’art.: 81133

¡IMPORTANTE! LEER DETENIDAMENTE ANTES DE SU USO Y GUARDAR PARA POSTERIORES CONSULTAS.

Volumen de suministro

- 1 x termómetro clínico digital
- 1 x 1,5 V LR41
- 1 x termómetro de baño
- 1 x aspirador nasal
- 1 x cepillo de dientes para dedo
- 1 x cepillo para el pelo
- 1 x peine
- 1 x tijera para uñas
- 1 x cortaúñas con lima integrada
- 1 x estuche
- 1 x manual de instrucciones

Material

100 % poliéster, plástico, acero inoxidable, silicona, TPE, cerdas naturales de pelo de cabra

¡ATENCIÓN!

- Estos artículos no son juguetes. Manténlos fuera del alcance de los niños.
- No dejes a los niños sin supervisión con el producto y cada uno de los productos individuales. El producto solo puede ser utilizado por adultos.
- Utiliza los artículos únicamente para el fin previsto.
- Antes de cada uso, comprueba que los artículos no presentan daños visibles. No los utilices si presentan indicios de defectos. Elimínalos de inmediato.

Termómetro de baño

Indicaciones de seguridad:

- Es importante revisar el tubo capilar con regularidad, en especial si ha sufrido alguna sacudida.
- Si los tubos están dañados, la indicación de la temperatura puede ser incorrecta.
- ¡Termómetro no calibrado!
- Temperatura óptima de baño (36-37 °C)
- Rango de medición de 0 °C a 50 °C como máx.
- ¡Tolerancia de temperatura ±2 °C!

Uso

Remover bien el agua. Introducir el termómetro en el agua del baño durante unos dos minutos. Leer la temperatura. **¡Comprobar la temperatura del agua también con el codo!**

Limpieza

Enjuagar con agua caliente después de cada uso. Dejar secar por completo.

Aspirador nasal de seguridad

Indicaciones de seguridad

- No utilices el aspirador nasal en la boca ni en los oídos.
- No lo introduzcas demasiado profundamente en la nariz, colócalo solo en la fosa nasal. Existe riesgo de lesiones.

Aplicación

Aprieta la bola de bombeo del centro y coloca con cuidado la punta de succión en la fosa nasal obstruida. Mantén la otra fosa nasal ligeramente cerrada con el dedo. Reduce lentamente la presión sobre la bola de bombeo y aspira la secreción.

Limpieza

Limpia el aspirador nasal con un detergente suave y agua tibia antes de utilizarlo por primera vez. Limpia el aspirador nasal antes y después de cada uso con un detergente suave y agua tibia. No utilices productos químicos que puedan dañar el material. Limpialo a fondo con agua corriente tibia antes y después de cada uso y desinfectalo en un vaporizador o hirviéndolo durante 5 minutos. No lo laves en el lavavajillas. Deja que se seque bien una vez desmontado. Para un almacenamiento higiénico, la punta de succión puede colocarse boca abajo en la bola de bombeo.

Cepillo de dientes para dedo

Aplicación

Coloca en el dedo el cepillo de dientes para dedo y masajea suavemente las encías o límpiате los dientes.

Limpieza

Antes del (primer) uso, desinfectálo en un vaporizador o hirviéndolo durante 5 minutos. No lo laves en el lavavajillas. Limpialo a fondo con agua corriente tibia antes y después de cada uso. No utilices productos químicos que puedan dañar el material.

Cepillo para el pelo y peine

Aplicación

Peina/cepilla suavemente desde la raíz hasta las puntas.

Limpieza

Limpia el cepillo y el peine con agua tibia y un poco de champú suave para bebés. Aclara bien y deja secar.

Tijeras y cortaúñas con lima de uñas integrada

Indicaciones de seguridad

- No cortes ni recortes las uñas demasiado cerca de la yema del dedo. Riesgo de lesiones.
- ¡Atención! ¡El cortaúñas contiene piezas pequeñas!

Aplicación

Se recomienda cortar o recortar las uñas después del baño, cuando están blandas.

La lima de uñas se encuentra en el cortaúñas. Para usarla, retira la parte trasera de goma del empujador.

Limpieza

Limpia las tijeras y el cortaúñas con un paño húmedo. Dejar secar por completo.

Estuche

Limpieza

Limpia el estuche con un paño húmedo. Dejar secar por completo.

No apto para lavado a máquina. No utilizar lejía, no secar en la secadora, no planchar y no limpiar en seco.

Termómetro clínico digital

Explicación de los símbolos

Los siguientes símbolos se utilizan en las instrucciones de uso, en el embalaje y en la placa identificadora del equipo y de los accesorios:

	Precaución
	Temperatura y humedad de almacenamiento y transporte admisibles
	Temperatura y humedad de funcionamiento admisibles
	Fabricante
	Siga las instrucciones de uso
	Pieza de aplicación tipo BF
	Eliminación conforme a la Directiva CE sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE)
	Denominación de lote
IP27	Protección contra la penetración de cuerpos extraños sólidos con un diámetro >12,5 mm. Protegido de la inmersión temporal.
	El marcado CE certifica la conformidad con los requisitos esenciales de la Directiva 93/42/CEE para los productos sanitarios.

Indicaciones de seguridad

- El termómetro está destinado exclusivamente a la medición de la temperatura del cuerpo humano.
- El termómetro está diseñado únicamente para los puntos de medición en el cuerpo humano especificados en el manual de instrucciones.
- Revise antes de cada uso que el equipo no presente ningún daño visible. Si observa algún daño, no debe utilizar este equipo.
- El termómetro se ha diseñado para uso doméstico.
- Los niños no deben utilizar el equipo sin la ayuda de un adulto. Los productos medicinales no son juguetes.
- Los niños menores de 12 años no deben tomar la temperatura corporal sin supervisión.
- Este termómetro contiene piezas pequeñas que se pueden ingerir o que representan un peligro de asfixia para los niños. Mantenga siempre el termómetro fuera del alcance de los niños.
- El equipo no debe abrirse, excepto la tapa del compartimento de las pilas. No se deben hacer modificaciones en el equipo. Si un equipo no funciona correctamente, póngase en contacto con su distribuidor.
- Guarde las pilas fuera del alcance de los niños. Podrían atragantarse.
- El termómetro contiene componentes electrónicos sensibles. Protéjalo de golpes, deformaciones, altas temperaturas o la luz solar directa.
- El tiempo mínimo de medición hasta la señal acústica debe respetarse sin excepción.
- El funcionamiento en las proximidades de campos electromagnéticos fuertes, por ejemplo, junto a un teléfono móvil, puede provocar fallos de funcionamiento.
- En caso de resultados llamativos de temperatura, contacte con su médico de familia inmediatamente.
- Tenga en cuenta que los equipos de comunicación de alta frecuencia portátiles y móviles pueden influir en este equipo. Puede solicitar información más detallada en la dirección del servicio de atención al cliente indicada.
- Si la temperatura ambiente es superior a 35°C o 95 °F, sumerja la punta del termómetro en agua fría durante unos 5 a 10 segundos antes de medir.

Puesta en funcionamiento

Para encenderlo, pulse el botón . Suena una señal acústica corta. En primer lugar, el termómetro realiza una autocomprobación. En la pantalla se muestran todos los segmentos (**fig.1**). A continuación se muestra el último valor medido durante unos 2 segundos. El termómetro está listo para la medición cuando en la pantalla aparece „Lo” y parpadea el símbolo „°C” o „°F”. Con la unidad apagada, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante aproximadamente 2 segundos para cambiar el ajuste actual entre °C y F.

Durante la medición, la temperatura actual se muestra continuamente y el símbolo „°C” parpadea durante todo el tiempo de medición. La medición concluye después de unos 20 segundos. La medición finaliza cuando se alcanza una estabilidad de la temperatura. Suena una señal acústica (10 pitidos lentos), el símbolo „°C” ya no parpadea y se muestra el valor de temperatura medido.

Para prolongar la vida útil de las pilas, apague el termómetro después de la medición pulsando brevemente el botón . De lo contrario, el termómetro se desconecta automáticamente después de unos 10 minutos.

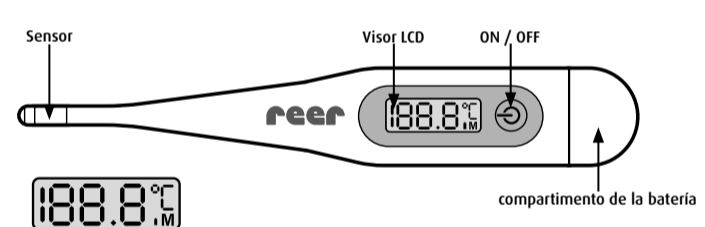


Fig. 1

Alarma de fiebre

Si se mide una temperatura corporal superior a 37,8 °C (100 °F), suena una alarma de fiebre (10 veces 3 pitidos rápidos). Tan pronto como se miden temperaturas fuera del rango de medición, aparece „Lo” en la pantalla a temperaturas por debajo de 32 °C (90 °F) y „Hi” por encima de 42,9 °C (109,9 °F).

Indicación del último valor medido

El último valor medido guardado se muestra siempre durante unos 2 segundos cuando se enciende el termómetro.

Dispersión de valores de medición

Las temperaturas medidas varían en función de los puntos de medición. Esto es normal y está causado por la diferente distribución de la temperatura en el cuerpo humano. Se obtiene, por ejemplo, en el caso de una temperatura medida en el recto de 36,6 °C, se obtiene un valor medido en la boca de 36,1 °C y un valor medido en la axila de 35,6 °C. Para varias mediciones debe hacer una pausa de aprox. 3 minutos.

Puntos de medición

En el ano (rectal)

Es el método más seguro. Es particularmente adecuado para bebés y niños pequeños. Introduzca cuidadosamente la punta del termómetro de 2 cm en el ano. Tiempo de medición: unos 20 segundos

En la cavidad bucal (oral)

En la cavidad bucal, las ligeras fluctuaciones de temperatura de medición a medición son normales. Son causadas por la diferente distribución de la temperatura en la cavidad bucal. Introduzca el termómetro en una de las dos zonas de calor debajo de la lengua, a la izquierda y a la derecha de la raíz de la lengua. El sensor de temperatura debe tener un buen contacto con los tejidos. Cierre la boca durante aprox. 1 minuto antes de la medición y respire con tranquilidad por la nariz. Introduzca después la punta de medición del termómetro en la zona de calor y cierre la boca. De este modo, el resultado de la medición no se ve afectado por el aire de respiración. Tiempo de medición en la cavidad bucal: unos 30 segundos

Debajo del brazo (axilar)

Desde un punto de vista médico, este tipo de medición arroja valores inexactos. Por lo tanto, no es adecuado para realizar mediciones precisas. La razón de ello es que el contacto del sensor de temperatura con la axila es considerablemente peor que en la medición oral o rectal. Así, no hay compensación de temperatura del sensor de temperatura con el tejido adyacente, algo necesario para una medición segura.

Método de medición	Duración recomendada de la medición	Desviación media respecto al método rectal
En el ano	hasta la señal acústica	-
En la cavidad bucal	hasta la señal acústica	-0,4 °C a -1,5 °C
Debajo del brazo	al menos 5 minutos	-0,7 °C a -2,0 °C


Cambio de las pilas

En cuanto aparece el símbolo en la pantalla, la pila está agotada y es necesario cambiarla. Sustituya la pila agotada por una del mismo tipo. Proceda de la siguiente manera:

Afloje el tornillo del compartimento de las pilas con un destornillador. Retire la pila usada e introduzca la pila nueva (LR41/ SR41/ UCC 392). Preste atención a la posición de montaje. El signo + en la pila debe apuntar hacia arriba.

A continuación, vuelva a enroscar la tapa del compartimento de las pilas en la carcasa. Las pilas están disponibles en tiendas de relojería o productos eléctricos.

Las pilas usadas no se deben desechar en la basura doméstica. Está legalmente obligado a desechar las pilas correctamente. Deshágase de ellas en una tienda de electricidad o en un centro de reciclaje local.

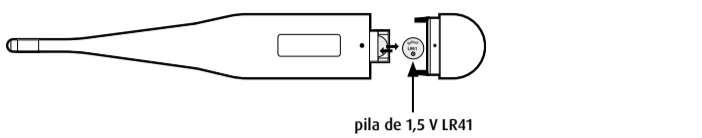

Indicaciones para la manipulación de pilas

- Si el líquido de una pila entra en contacto con la piel o los ojos, lave el área afectada con agua y solicite atención médica.
- Si la pila tiene fugas, póngase guantes protectores y limpie el compartimento de las pilas con un paño seco.
- Proteja las pilas del calor excesivo.

¡Peligro de asfixia!

Los niños pequeños pueden tragarse las pilas y asfixiarse. De modo que mantenga las pilas fuera del alcance de los niños pequeños.

Control técnico de medición

Por regla general, no es necesario comprobar la precisión de medición del termómetro. Para los equipo que se utilizan en consultas médicas, la ordenanza de productos médicos alemana del 29 de junio de 1998 (en la versión publicada el 21/08/2002, modificada por última vez por el artículo 7 de la Ley del 21/04/2021) exige realizar controles técnicos de medición cada 2 años. Los servicios de metrología llevan a cabo una inspección metroológica, que está sujeta al pago de una tasa.

Limpieza y desinfección

- Desinfecte el termómetro y la punta de medición con alcohol (alcohol isopropílico al 75 %). Todas las farmacias venden hisopos con alcohol (algodones impregnados con alcohol) de diferentes proveedores con los que se puede limpiar completamente el equipo.
- Seque el termómetro con un paño suave.
- NO HERVIR NI LIMPIAR EN EL LAVAVAJILLAS. Esto perjudica la funcionalidad del termómetro y anula la garantía.
- No limpie el equipo con diluyente o disolvente químico.
- Mantenga el termómetro seco, libre de polvo y protegido de la suciedad y la luz solar directa.

Contaminación microbiana

Dado que a menudo no se realiza una desinfección al 100 % en el uso doméstico, se recomienda encarecidamente que cada paciente utilice su propio termómetro.

Indicaciones de eliminación

Las pilas deben desecharse adecuadamente. Para ello, en los comercios de venta de pilas y en los puntos de recogida municipales se dispone de contenedores adecuados para la eliminación de las pilas.

Al final de su vida útil, deseche el equipo adecuadamente en un punto de recogida municipal de equipos eléctricos obsoletos.

Bases legales para su comercialización en la UE:

El fabricante dispone de un certificado de conformidad con la Directiva 93/42/CEE sobre productos sanitarios. Este equipo cumple la norma europea EN60601-1-2 de compatibilidad electromagnética y los requisitos de la norma EN 12470-3.

Datos técnicos

Tipo:	Termómetro digital ClassicTemp
Número de artículo:	98102 (Modelo: DMT-4132)
Rango de medición:	32,0°C a 42,9°C (90°F–109,9°F)
Precisión de la medición:	±0,1 °C (±0,2 °F) en baño de agua entre 35,0–42,0 °C (95 °F–107,6 °F) ±0,2°(±0,4°F) ad una temperatura compresa tra 32,0 -35,5°(89,6°F - 95,9°F) e 42,0° C - 42,2°(107,6°F-108,1°F)
Unidades de medición:	Celsius (° C)
Alarma de fiebre:	indicadores de advertencia acústicos >37,8°C (100 °F)
Indicación:	Visor LCD
Tipo de pila:	1 x LR41 (incluido en la entrega)
Peso neto:	13 g
Temperatura ambiental	
En funcionamiento	+5 °C a +40 °C, con una humedad relativa del aire entre el 15 % y el 95 %
Almacenamiento/transporte	-20 °C a +55 °C, con una humedad relativa del aire entre el 15 % y el 95 %

Batería

- Tipo: LR41
- Sistema químico: AlMn
- Tensión nominal: 1,5V
- Capacidad: 41mAh
- Fabricante: Guangdong TIANQIU Electronics Technology Co., Ltd.
- Dirección: Tianqiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone, Machong Town, Dongguan, Guangdong, China
- Página de inicio: www.tmmq.cn

		Company Address
--	--	------------------------

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

	JOYTECH HEALTHCARE Co., Ltd.
--	-------------------------------------

No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou city, 311100, Zhejiang, China

Garantía

Conserve el justificante de compra, el manual de instrucciones y el número de artículo. Las reclamaciones de garantía o por compromisos de garantía deben tramitarse exclusivamente con el distribuidor. El período de garantía legal de 2 años comienza el día de la compra. Quedan excluidos de la responsabilidad por defectos los daños causados por una manipulación inadecuada. Los requisitos para reclamar la garantía son el comprobante de compra y una descripción del fallo.

Todos los datos técnicos, la información y las propiedades del producto descrito en esta publicación se han recopilado según nuestro leal saber y entender y corresponden al estado en el momento de su publicación. La información proporcionada por reer es correcta y fiable. No obstante, la empresa reer no asume ninguna responsabilidad ante posibles errores en este documento y se reserva el derecho de realizar modificaciones en el diseño o en las especificaciones del producto sin previo aviso.

Comercialización y servicio técnico:

reer GmbH • Mühlstr. 41 • 71229 Leonberg • Germany
www.reer.de • info@reer.de

BabyCare verzorgingsset

Gebruiksaanwijzing // Art.nr.: 81133

BELANGRIJK!

LEES DIT DOCUMENT VÓÓR GEBRUIK ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR VOOR LATERE REFERENTIE.

Leveringsomvang

- 1× digitale koortsthermometer
- 1× 1,5 V LR41
- 1× badthermometer
- 1× neusreiniger
- 1× vingertandenborstel
- 1× haarborstel
- 1× kam
- 1× nagelschaartje
- 1× nagelknipper met geïntegreerde nagelvijl
- 1× etui
- 1× gebruiksaanwijzing

Materiaal

100% polyester, plastica / kunststof, staal, silicone, TPE, natuurlijke borstels van geitenhaar

LET OP!

- Deze items zijn geen speelgoed. Houd deze buiten het bereik van kinderen!
- Laat kinderen niet zonder toezicht bij het product en de afzonderlijke onderdelen achter. Alleen door volwassenen te gebruiken.
- Gebruik de artikelen alleen waarvoor ze bedoeld zijn.
- Controleer de artikelen voor elk gebruik op zichtbare schade. Het product niet gebruiken als het gebreken vertoont, maar gooi het in dat geval weg!

Badthermometer

Veiligheidsinstructies

- Controleer regelmatig de capillaire buis, vooral na stoten of schokken!
- Beschadiging kan leiden tot een onjuiste temperatuurweergave!
- Geen gekalibreerde thermometer!
- Optimale badtemperatuur (36-37 °C)
- meetbereik 0 °C tot max. 50 °C
- Temperatuurtolerantie ±2°C!

Gebruik

Het water goed mengen. Plaats de thermometer ongeveer 2 minuten in het badwater. Lees de temperatuur af. **Controleer ook de watertemperatuur met je elleboog!**

Reiniging

Na elk gebruik afspoelen met warm water. Laat het daarna goed drogen.

Veiligheidsneusreiniger

Veiligheidsinstructies

- Gebruik de neusreiniger niet in de mond of oren!
- Steek de neusreiniger niet te diep in de neus, maar plaats deze alleen bij het neusgat. Risico op letsel!

Gebruik

Knipj in het midden in de pompbal en plaats de zuigtip voorzichtig bij het verstopte neusgat. Houd het andere neusgat een beetje dicht met je vinger. Verminder langzaam de druk op de pompbal en zuig de afscheiding eruit.

Reiniging

Maak de neusreiniger vóór het eerste gebruik schoon met een mild schoonmaakmiddel en warm water. Maak de neusreiniger voor en na elk gebruik schoon met een mild schoonmaakmiddel en warm water. Gebruik geen chemicaliën die het materiaal kunnen beschadigen. Maak de neusreiniger voor en na elk gebruik grondig schoon onder warm stromend water. Desinfecteer de neusreiniger in de sterilisator of door deze 5 minuten in water uit te koken. Niet reinigen in de vaatwasser! Uit elkaar gehaald grondig laten drogen. Voor een hygiënische opslag kun je de zuigtip ondersteboven in de pompbal plaatsen.

Vingertandenborstel

Gebruik

Plaats de vingertandenborstel op je vinger en masseer zachtjes het tandvlees of poets de tanden.

Reiniging

Desinfecteer de vingertandenborstel voor (het eerste) gebruik in een sterilisator of door deze 5 minuten in water te koken. Niet reinigen in de vaatwasser! Maak de vingertandenborstel voor en na elk gebruik grondig schoon onder warm stromend water. Gebruik geen chemicaliën die het materiaal kunnen beschadigen.

Haarborstel en kam

Gebruik

Kam/borstel zachtjes vanuit de haarinplant naar de uiteinden.

Reiniging

Maak de borstel en kam schoon met warm water en een beetje milde babyshampoo. Spoel de borstel/kam goed af en laat drogen.

Nagelschaartje en nagelknipper met geïntegreerde nagelvijl

Veiligheidsinstructies

- Snijd of knip de nagels niet te dicht bij de vingertop af. Risico op letsel!
- Let op! De nagelknipper omvat kleine onderdelen!

Gebruik

Je kunt het beste de nagels knippen na een bad wanneer de nagels zacht zijn.

De nagelvijl bevindt zich op de nagelknipper. Trek de rubberen achterkant eraf.

Reiniging

Veeg het nagelschaartje en de nagelknipper af met een vochtige doek. Laat het daarna goed drogen.

Etui

Reiniging


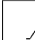







Veeg het etui af met een vochtige doek. Laat het daarna goed drogen.

Niet machinewasbaar. Niet bleken, niet in de droger, niet strijken en niet chemisch reinigen.

Digitale koortsthermometer

Verklaring van de gebruikte symbolen

In de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat en accessoires worden de volgende symbolen gebruikt:

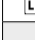	Voorzichtig
	Toegestane temperatuur en luchtvochtigheid bij opslag en transport
	Toegestane temperatuur en luchtvochtigheid bij gebruik
	Fabrikant
	Gebruiksaanwijzing in acht nemen
	Toepassingsgedeelte van het type BF
	Verwijdering conform de EG-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Batchnummer
IP27	Beschermd tegen het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen met een diameter van > 12,5 mm. Beschermd tegen tijdelijke onderdempeling.
	De CE-markering toont de conformiteit van dit product met de basisvereisten van richtlijn 93/42/EEG voor medische hulpmiddelen aan.


Veiligheidsaanwijzingen


- De thermometer is uitsluitend bedoeld voor het meten van de lichaamstemperatuur bij mensen.
- De thermometer is alleen ontworpen voor de in de gebruiksaanwijzing vermelde meetpunten van het menselijk lichaam.
- Controleer het apparaat voor ieder gebruik op zichtbare schade. Wanneer u schade heeft geconstateerd, mag dit apparaat niet worden gebruikt.
- De thermometer is alleen bestemd voor privé gebruik.
- Laat kinderen het apparaat alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken. Medische apparatuur is geen speelgoed.
- Laat kinderen jonger dan 12 jaar niet zonder toezicht hun lichaamstemperatuur opnemen.
- Deze thermometer bevat kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt of voor jonge kinderen verstikingsgevaar kunnen opleveren. Bewaar de thermometer altijd buiten het bereik van kinderen.
- Het apparaat mag, met uitzondering van het deksel van het batterijcompartiment, niet geopend worden. Aan het apparaat mogen geen wijzigingen worden aangebracht. Wij verzoeken u contact op te nemen met de leverancier, mocht het apparaat niet naar behoren werken.
- De batterijen buiten het bereik van kinderen bewaren. Er bestaat risico op inslikken.
- De thermometer bevat kwetsbare elektronische onderdelen. Schokken, verbuigingen, hoge temperaturen en direct zonlicht moeten dan ook worden voorkomen.
- De minimale meettijd tot aan het akoestische signaal moet worden aangehouden.
- Het gebruik in de buurt van elektromagnetische velden, bijvoorbeeld naast een mobiele telefoon, kan tot storingen leiden.
- Neem bij een opvallend meetresultaat direct contact op met uw huisarts.
- Houd er daarbij rekening mee dat draagbare en mobiele HF-communicatiesystemen de werking van dit apparaat kunnen beïnvloeden. Aanvullende informatie hierover kunt u bij de vermelde klantenservice-adressen opvragen, maar u vindt deze.
- Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 35°C of 95 °F, dompel de thermometertip dan ongeveer 5 tot 10 seconden onder in koud water alvorens de meting uit te voeren.

Ingebruikname

Druk op de -toets om de thermometer in te schakelen. U hoort een kort akoestisch signaal. De thermometer voert nu eerst een zelftest uit. Daarbij verschijnen op het display alle segmenten (**afb. 1**) van de indicatie. Daarna wordt gedurende 2 seconden de laatste gemeten waarde weergegeven. De thermometer is gereed voor de meting als op het display “Lo” te zien is en het symbool “°C” dan wel “°F” knippert. Terwijl het toestel is uitgeschakeld, houdt u de Aan/Uit-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt om de huidige instelling wijzigen tussen °C en F.

Tijdens het meten wordt de huidige temperatuur constant weergegeven en het symbool “°C” knippert voortdurend. Na ongeveer 20seconden is de meting voltooid. De meting stopt als een constante temperatuur wordt geregistreerd. De thermometer geeft een geluidssignaal af (10 langzame pieptonen), het “°C”-symbool stopt met knipperen en de gemeten temperatuur wordt weergegeven.

Om de levensduur van de batterij te verlengen, schakelt u de thermometer na het meten uit door de -toets even in te drukken. In het andere geval gaat de thermometer na ongeveer 10 minuten automatisch uit.

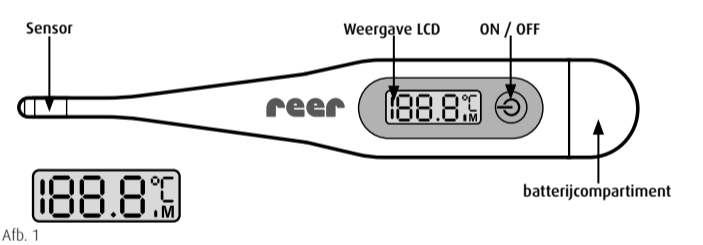

Afb. 1

Koortsalarm

Indien een lichaamstemperatuur boven 37,8 °C (100 °F) wordt gemeten, wordt een koortsalarm (10 x 3 snelle pieptonen). Zodra een temperatuur wordt gemeten die buiten het meetbereik ligt, verschijnt op het display “Lo” bij temperaturen onder 32 °C (90°F) en “Hi” bij temperatuur boven 42,9 °C (109,9 °F).

Weergave van de laatste gemeten waarde

De laatste gemeten waarde verschijnt bij het inschakelen van de thermometer altijd ongeveer 2 seconden op het display.

Strooiing van meetwaarden

De gemeten temperaturen variëren, afhankelijk van de meetplaats. Dat is normaal en wordt veroorzaakt door de verschillen in de temperatuurverdeling in het menselijk lichaam. Zo zal bijvoorbeeld bij een rectaal gemeten temperatuur van 36,6 °C oraal een temperatuur van 36,1 °C en axillair een temperatuur van 35,6 °C worden gemeten. Bij verschillende metingen kunt u het beste een interval van 4 minuten aanhouden.

Meetplaatsen

In het rectum (rectaal)

Dit is de veiligste methode. Deze methode is bij uitstek geschikt voor baby’s en peuters. De punt van de thermo-meter wordt hierbij voorzichtig 2 cm in het rectum ingebracht. Meettijd: ongeveer 20 seconden

In de mondholte (oraal)


In de mondholte zijn geringe temperatuurschommelingen tussen de afzonderlijke metingen volkomen normaal. Ze worden veroorzaakt door de uiteenlopende temperatuurverdeling in de mondholte. Plaats de thermometer-punt in een van de twee warmtepockets onder de tong, links en rechts bij de tongwortel. De temperatuursensor moet goed contact maken met het weefsel. Houd de mond voor de meting ongeveer 1 minuut lang gesloten en adem rustig door de neus. Plaats dan de thermometerpunt in de warmtepocket en sluit de mond. Zo wordt het meetresultaat niet beïnvloed door de ademlucht. Meettijd in de mondholte: ongeveer 30 seconden

In de oksel (axillair)

Vanuit medisch oogpunt is deze meetmethode te onnauwkeurig. De methode is dan ook niet geschikt voor het verkrijgen van nauwkeurige meetresultaten. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat de temperatuursensor in de okselholte veel minder goed contact maakt dan bij een orale of rectale meting. Daardoor vindt geen temperatuurcompensatie van de temperatuursensor ten opzichte van het aangrenzende weefsel plaats, die voor een betrouwbare meting noodzakelijk is.


Meetmethode	Aanbevolen meetduur	Gemiddelde afwijking ten opzicht van de rectale methode
In het rectum	tot aan het akoestische signaal	-
In de mondholte	tot aan het akoestische signaal	-0,4 °C tot -1,5 °C
In de oksel	minstens 5 minuten	-0,7 °C tot -2,0 °C

Batterij vervangen

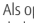Als op het display het symbool  verschijnt, is de batterij nagenoeg leeg en een vervanging noodzakelijk. Vervang de lege batterij door een nieuwe batterij van hetzelfde type. Ga daarbij als volgt te werk:

Draai de schroef van het batterijcompartiment los met een schroevendraaier. Verwijder de lege batterij en plaats de nieuwe batterij (LR41/ SR41/ UCC 392). Let daarbij op de juist positie. Het +-tekens op de batterij moet naar boven wijzen. Schroef aansluitend het deksel van het batterijcompartiment weer vast. Batterijen zijn verkrijgbaar bij horloge- of elektrospciaalzakken.

Lege batterijen horen niet thuis in de afvalbak. U bent wettelijk verplicht de batterijen volgens de voorschriften te verwijderen. Geef ze af bij uw elektrospciaalzaak of het lokale milieupark.

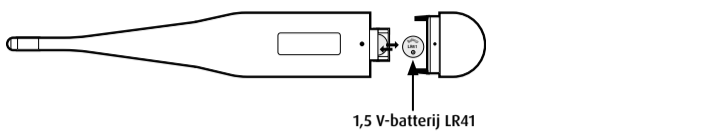

⚠ Aanwijzingen voor de omgang met batterijen

- Als de vloeistof uit een batterij in contact komt met de huid of de ogen, spoel dan de betreffende plaats af of uit met water en consulteer een arts.
- In geval van een uitgelopen batterij beschermende handschoenen aantrekken en het batterijcompartiment met een droge doek reinigen.
- Bescherm de batterij tegen overmatig warmte.

⚠ Gevaar van inslikken!

Jonge kinderen kunnen de batterij inslikken en daardoor stikken. Bewaar batterijen dan ook buiten het bereik van kinderen!

Meettechnische controle

Een controle van de koortsthermometer is doorgaans niet nodig. Instrumenten die in Duitsland in een medische praktijk worden gebruikt moeten volgens de richtlijn voor de gebruikers van medische hulpmiddelen van 29 juni 1998 (in de versie die op 21-8-2002 is afgekondigd, voor het laatst gewijzigd door artikel 7 van de wet van 21-4-2021) na 2 jaar worden onderworpen aan een meettechnische controle. Een meettechnische controle waaraan kosten verbonden zijn wordt door een officieel meettechnisch instituut uitgevoerd.

Reiniging en desinfectie

- Ontsmet de thermometer en de meetpunt met alcohol (75% isopropylalcohol). Bij elke apotheek zijn alcoholpads van verschillende leveranciers verkrijgbaar waarmee u de hele thermometer kunt afvegen.
- Droog de thermometer met een zachte, droge doek af.
- NIEU UITKOKEN OF IN DE VAATWASSER REINIGEN.** Hierdoor wordt de werking van de thermometer nadelig beïnvloed en vervalt de garantie.
- Reinig het instrument niet met verdunner of chemische oplosmiddelen.
- Bewaar de thermometer op een droge, stofvrije en tegen vervuiling en direct zonlicht beschermde plaats.

Microbacteriële contaminatie

Omdat volledige ontsmetting bij huishoudelijk gebruik vaak niet mogelijk is, wordt met klem geadviseerd voor elke patiënt een aparte thermometer te gebruiken.

Aanwijzingen voor de verwijdering



 De batterijen moeten vakkundig verwijderd worden. Hiervoor vindt u in winkels waar batterijen worden verkocht en in gemeentelijke milieuparken containers voor het inleveren van batterijen.

 Wij vragen u het instrument na afloop van de gebruiksduur deskundig te verwijderen via een gemeentelijke inzamelingsplaats voor afgedankte elektrische apparatuur.

De wettelijke basis voor het in de handel brengen binnen de EU:

De fabrikant is gecertificeerd conform de richtlijn 93/42/EEG voor medische hulpmiddelen. Dit instrument voldoet aan de Europese norm EN60601-1-2 inzake elektromagnetische compatibiliteit en voldoet aan de eisen van EN 12470-3.

Technische gegevens

Type:	ClassicTemp digitale koortsthermometer
Artikelnummer:	98102 (Model: DMT-4132)
Meetbereik:	32,0°C tot 42,9°C (90°F–109°F)
Meetnauwkeurigheid:	±0,1°C(±0,2°F) in een waterbad tussen 35,0-42,0°C (95°F-107,6°F) <p>±0,2°C (±0,4°F) bij een temperatuur tussen 32,0 -35,5°C (89,6°F - 95,9°F) en 42,0°C - 42,2°C (107,6°F-108,1°F)</p>
Meeteenheden:	Celsius (° C)
Koortsalarm:	akoestische waarschuwingssignalen >37,8°C (100 °F)
Indicatie:	Weergave LCD
Type batterij:	1 x LR41 (Inbegrepen bij levering)
Nettogewicht:	13 g
Kamertemperatuur	
 Operating	+5 °C tot +40 °C, bij een relatieve luchtvochtigheid tussen 15 % en 95 %
 Opslag/transport	-20 °C tot +55 °C, bij een relatieve luchtvochtigheid tussen 15% en 95 %

Batterij

- Type: LR41
- Chemisch systeem: AlMn
- Nominale spanning: 1,5V
- Capaciteit: 41mAh
- Fabrikant: Guangdong TIANQIU Electronics Technology Co., Ltd.
- Adres: Tianqiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone, Machong Town, Dongguan, Guangdong, China
- Homepage: www.tmmq.cn

	Company Address
---	------------------------

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

JOYTECH HEALTHCARE Co., Ltd.

No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou city, 311100, Zhejiang, China

Garantie

Gelieve het aankoopbewijs, de gebruiksaanwijzing en het artikelnummer te bewaren. Garantieclaims of aanspraken voortvloeiende uit garantie moeten uitsluitend met de handelaar geregeld worden. De wettelijke garantietermijn van 2 jaar begint op de dag van aankoop. Schade die het gevolg is van een onjuiste behandeling is uitgesloten van de aansprakelijkheid voor gebreken. Een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de garantie is het aankoopbewijs en een beschrijving van de fout.

Alle technische gegevens, informatie en eigenschappen van het in dit drukwerk beschreven product worden naar ons beste weten en overeenkomstig de stand bij publicatie opgesteld. De door reer verstrekte informatie zou nauwkeurig en betrouwbaar moeten zijn. Toch stelt de firma reer zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke fouten die in dit document staan en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen aan te brengen aan het product resp. de specificaties van het product.

Verkoop en klantenservice:

reer GmbH • Mühlstr. 41 • 71229 Leonberg • Germany
www.reer.de • info@reer.de